




Kimiko Massage Chair

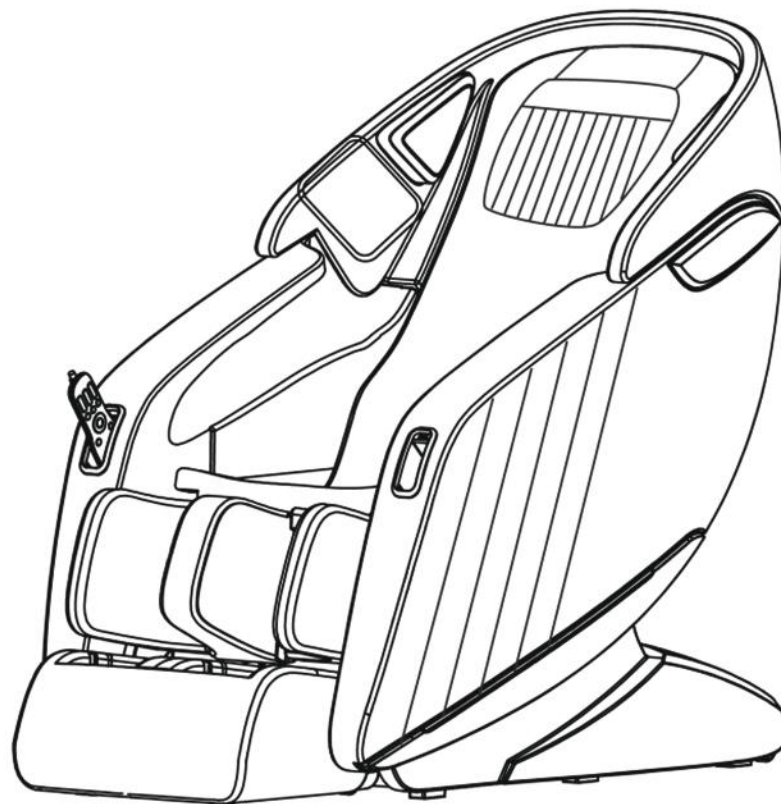


FZ-Kimiko

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## 1. Điều chỉnh ngả xuống tự động

- Sau khi bắt đầu massage, ghế sẽ đi vào vị trí hạ xuống tự động và tìm ra vị trí vai phù hợp


Màn hình hiển thị:

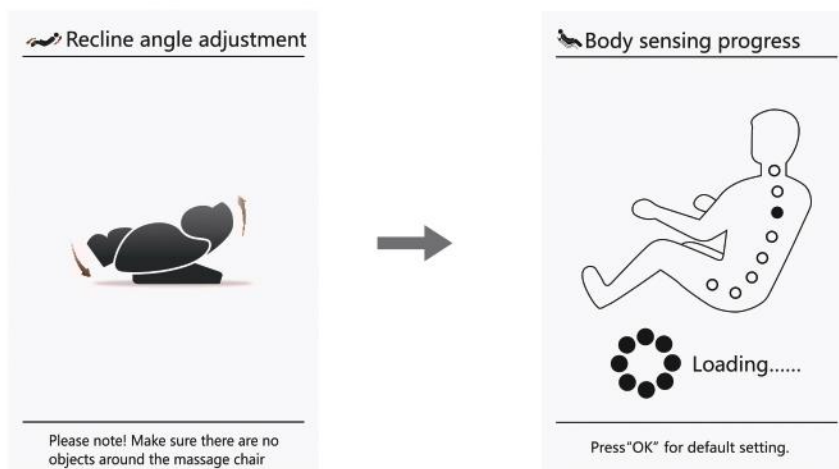

## 2. Quét và điều chỉnh vị trí vai

Khi tay massage tìm ra vị trí vai, chuông sẽ kêu "Didi" điều chỉnh bằng việc đẩy "lên" hoặc "xuống" nếu ghế đang không ở đúng vị trí. Có tất cả 11 lựa chọn. Sản phẩm sẽ đi vào chế độ massage nếu không có sự điều chỉnh trong vòng 10 giây hay bằng việc bấm nút "ok". Nếu vị trí vai không thể được tìm ra, việc massage sẽ vận hành dựa trên chiều cao vai mặc định.

Màn hình hiển thị:

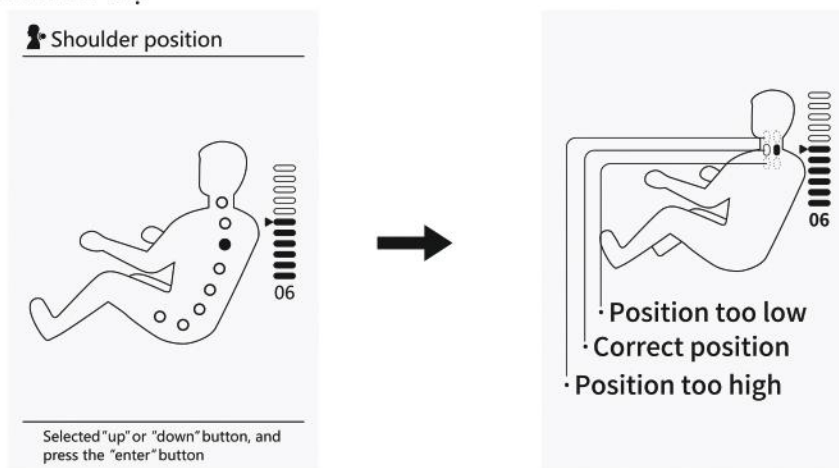

Phím	Miêu tả
	Di chuyển con lăn vị trí đi lên phù hợp .
	Di chuyển con lăn hạ xuống vị trí phù hợp

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## 6. Chương trình thủ công

Ấn nút “Menu” để đi đến giao diện menu, chọn biểu tượng chương trình thủ công bao gồm phương pháp, khu vực, tốc độ, độ rộng, con lăn và xoa bóp, v.v...


Có 9 phương pháp: xoa bóp 360o, xoa bóp theo chiều kim đồng hồ, xoa bóp ngược chiều kim đồng hồ, xoa bóp phần trên, xoa bóp phần dưới, đấm nhẹ, xoa bóp & đấm nhẹ, gõ và shiatsu.

Có 5 khu vực: toàn bộ lưng, lưng trên, lửa lưng dưới, từng phần và cố định.

Có 5 lựa chọn tốc độ: tốc độ chỉ có thể được điều chỉnh khi ở chế độ thủ công

Có 3 lựa chọn độ rộng, độ rộng chỉ có thể được điều chỉnh trong trạng thái vỗ, gõ và shiatsu ở chế độ thủ công

Màn hình hiển thị:

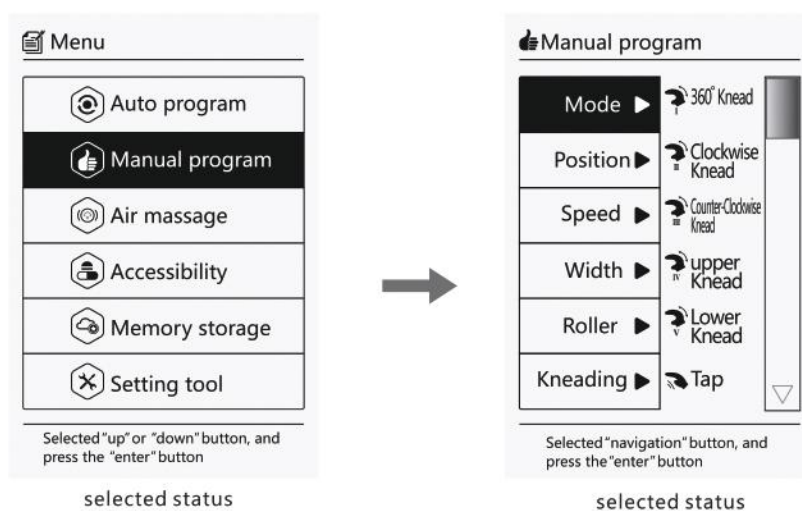

Những trạng thái được chọn: con lăn chân: massage cuộn với 3 lựa chọn tốc độ Nó sẽ massage cho khu vực bàn chân, nhằm thúc đẩy lưu thông máu và trao đổi chất của cơ thể.


Xoa bóp phần nghỉ bắp chân: massage xoa bóp phần nghỉ bắp chân với 3 lựa chọn tốc độ, những người phải ngồi với thời gian dài, không vận động và đang chịu đựng tình trạng bàn tay và bàn chân lạnh gây ra bởi lưu thông máu kém hiệu quả ở phần thân dưới.

Chú ý: Ấn “Lên” và “Xuống” để chọn, ấn “Trái” để trở lại bảng chọn phía trước, ấn “Phải” để đi đến bảng chọn tiếp theo, ấn “Ok” để xác nhận (những cách vận hành này đều giống nhau khi ở những giao diện khác)

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG


## 7. Massage túi khí

Ấn 'Menu' để đi đến, chọn massage túi khí: toàn bộ cơ thể, phần trên cơ thể, phần dưới cơ thể. Có 3 cường độ.

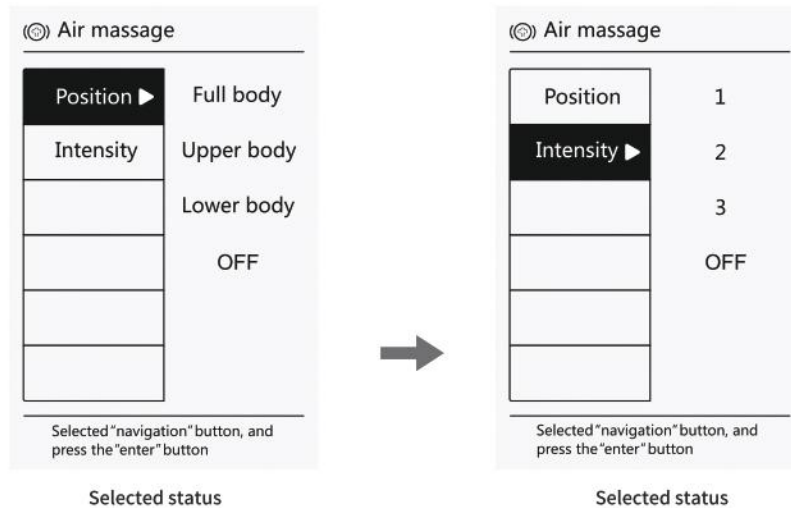

## 8. Những chức năng bổ sung

Sản phẩm được thiết kế với chức năng cung cấp nhiệt phần thắt lưng: thông qua sợi siêu mịn với nguồn hồng ngoại xa nhằm đẩy nhanh lưu thông máu và ngăn chặn căng cứng cơ phần thắt lưng

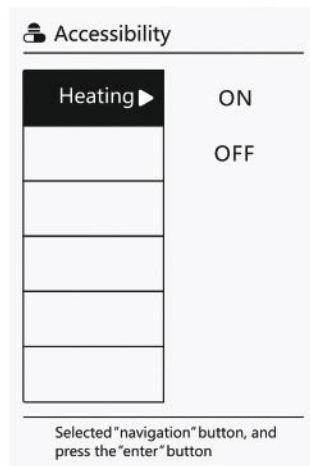


# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## 9. Kho bộ nhớ

Ấn "Menu" để đi đến giao diện , chọn chức năng kho bộ nhớ: M1, M2 và M3

Lưu: lưu trữ chế độ massage hiện tại, các cách thức massage, chế độ túi khí và cường độ, vị trí phần nghỉ lưng và bắp chân, v.v..

Sử dụng: chọn chế độ massage đã lưu, cách thức massage, chế độ túi khí và cường độ, vị trí phần nghỉ lưng và bắp chân, v.v..

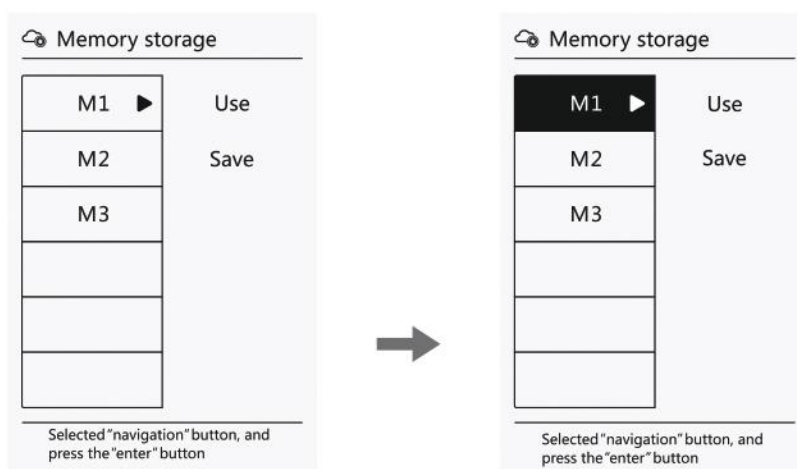

## 10. Công cụ cài đặt


Ấn "Menu" để đi đến giao diện bảng chọn, chọn biểu tượng công cụ cài đặt: hẹn giờ, đèn LED, Bluetooth, ngôn ngữ.

Có 3 mức hẹn giờ: 10 phút, 20 phút và 30 phút.

Bluetooth: bật bluetooth ở trên điều khiển từ xa và điện thoại di động và kết nối với ghế massage (kết nối mã 0000 hoặc 1234), nhạc sẽ được bật khi kết nối thành công.

Đèn LED: bật và tắt đèn LED

Ngôn ngữ: , tiếng Anh, tiếng Việt

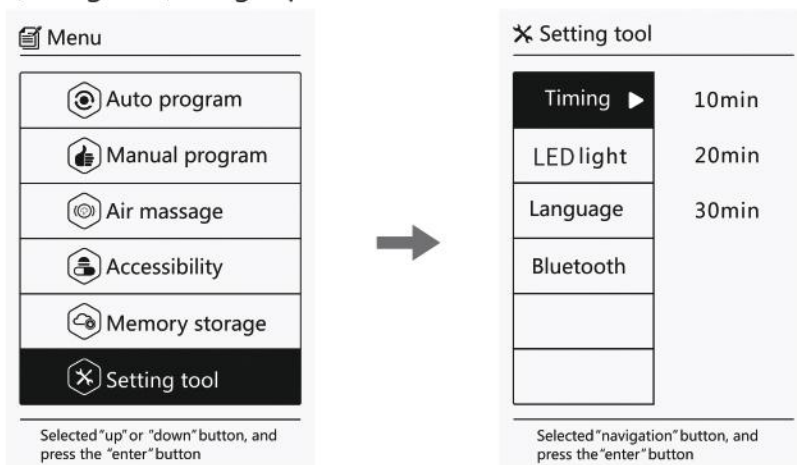



# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## III / Vận hành điều khiển giọng nói

Đánh thức chức năng giọng nói bằng "Xin chào" khi ghế massage được bật ở chế độ chờ. Chỉ khi được đánh thức, ghế sẽ trả lời: "Chào bạn, tôi đã sẵn sàng", người dùng có thể nói trong vòng 6 giây, nếu không chức năng giọng nói sẽ tự động tắt và cần đánh thức lại.

Trong môi trường ồn ào hay khi nhạc đang bật, đánh thức giọng nói có thể không cảm nhận được, nó có thể được hoàn thành bằng việc ấn nút điều khiển giọng nói trên tay điều khiển. Ấn nút để đánh thức, tắt nó đi bằng cách 3 giây, và đánh thức giọng nói trong trường hợp này chỉ có thể hoàn thành bằng việc ấn nút.







Chú ý: Vui lòng đọc đúng và chậm rãi, theo bảng dưới đây:

Điều khiển giọng nói		
Đánh thức: "Xin chào". Phản hồi: "Chào bạn! Tôi đã sẵn sàng"		
No.	Câu lệnh	Phản hồi
1	Bật massage	Mời chọn bài massage
2	Tắt massage	Xin chào và hẹn gặp lại!
3	Thoải mái	Đã điều chỉnh
4	Ngủ ngon	Đã điều chỉnh
5	Chăm sóc sức khỏe	Đã điều chỉnh
6	Giảm đau	Đã điều chỉnh
7	Kéo giãn	Đã điều chỉnh
8	Cổ và vai	Đã điều chỉnh
9	Massage eo	Đã điều chỉnh
10	Trẻ hóa	Đã điều chỉnh
11	Massage thủ công	Đã điều chỉnh
12	Đổi liệu pháp massage	Đã thay đổi
13	Hạ con lăn massage	Đã điều chỉnh
14	Nâng con lăn massage	Đã điều chỉnh
15	Nâng mông	Đã điều chỉnh
16	Ngả ghế	Đã điều chỉnh
17	Dừng điều chỉnh	Đã dừng điều chỉnh

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## IV / Điều chỉnh vị trí


- Bao gồm ngả và hạ phần tựa bắp chân, nâng mông, ngả xuống, không trọng lực 1 và không trọng lực 2.

Phím	Miêu tả
	Nâng bắp chân: từ từ nâng bắp chân lên bằng cách nhấn nút này, dừng lại khi nhả tay bấm.
	Ngả bắp chân: từ từ hạ bắp chân sẽ hạ xuống nó sẽ dừng lại khi nhả tay bấm.
	Nâng mông nhấc phần tựa lưng lên và từ từ hạ phần chân xuống bằng cách nhấn nút này, nó sẽ dừng lại khi nhả tay bấm.
	Ngả xuống: ngả tựa lưng xuống và từ từ nâng phần chân bằng cách nhấn nút này, nó sẽ dừng lại khi nhả tay bấm.
	Không trọng lực 1: điều chỉnh góc thành không trọng lực 1 bằng cách nhấn nút này.
	Không trọng lực 2: điều chỉnh góc thành không trọng lực 2 bằng cách nhấn nút này.


## V/ Tắt và ngừng việc massage

- Dừng tất cả chức năng massage bằng việc ấn nút "On/Off" trong quá trình massage, phần nghỉ bắp chân, phần nghỉ lưng, tay massage trở lại vị trí ban đầu. Khi hết hẹn giờ, tất cả các chức năng massage sẽ tự động dừng trong khi vị trí phần nghỉ bắp chân và phần nghỉ lưng không thay đổi.
- Nút tắt nguồn.


### 1 Tắt nguồn

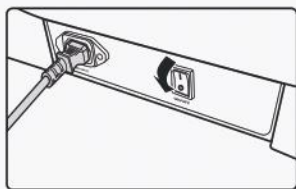

### 2 Rút phích cắm nguồn

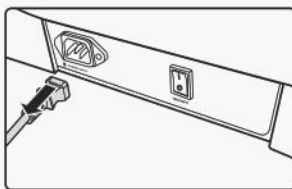

### 3 Rút dây nguồn

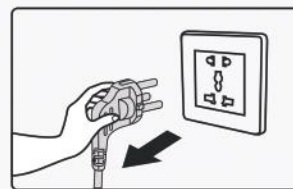


# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

---

## VI / Di chuyển sản phẩm

- Di chuyển phần nghỉ lưng đến vị trí cao nhất.
- Ngắt nguồn điện và rút phích cắm điện ra.
- Nâng phần đằng trước lên và ấn phần lưng xuống, di chuyển ghế bằng bánh xe ở phần dưới chân ghế; Khi hoàn tất việc di chuyển, từ từ đưa ghế trở lại hình dạng ban đầu .

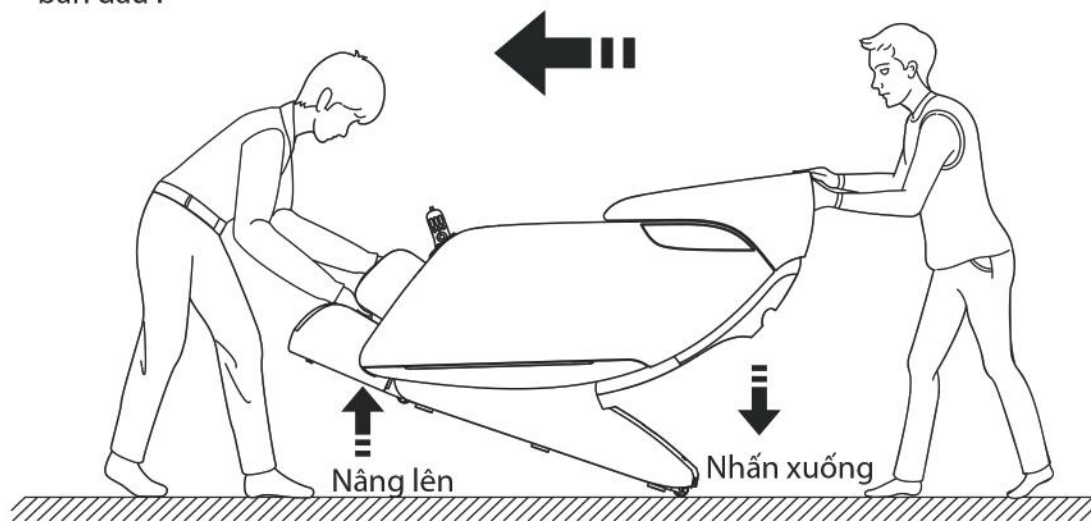

Chú ý: Chỉ được phép di chuyển khi nút nguồn đã được tắt và dây nguồn điện cũng như dây điện điều khiển đang không được kết nối.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

---

Tên: Ghế massage

Model: Kimiko

Điện áp định mức: 100V-120V~ 60Hz

220V-240V ~ 50/60Hz

Công suất định mức: 150W

Thiết kế an toàn: Class 1

Tiêu chuẩn vận hành: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



## BẢO TRÌ VÀ LÀM SẠCH

---

1. Không vệ sinh sản phẩm bằng những chất tẩy rửa ăn mòn ví dụ như chất làm loãng.
2. Không là ủi lớp chất liệu bề mặt.
3. Không ấn, gõ và cào ghế massage.
4. Ấn nút trên điều khiển từ xa một cách nhẹ nhàng.
5. Không nên sử dụng sản phẩm quá 30 phút/1 lần dùng.
6. Hãy rút phích cắm điện ngay sau khi sử dụng.
7. Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh, không chạm vào ổ cắm khi tay ướt để tránh bị sốc điện hay thương tích.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng, để biết cách sử dụng phù hợp. Vui lòng chú ý đến các cảnh báo quan trọng và giữ sổ tay hướng dẫn này đúng cách.

Ghi chú: công ty chúng tôi giữ quyền thay đổi và giải thích thiết kế sản phẩm, chúng tôi sẽ không thông báo nếu có sự thay đổi, vui lòng kiểm tra và căn cứ vào sản phẩm thực tế.

## NỘI DUNG

---

An toàn và bảo trì	02-03
Cảnh báo	04-05
Bộ phận	06
Chức năng	07
Hướng dẫn điều khiển	08-09
Phương pháp sử dụng	10-19
Bật nguồn	10
Vận hành chức năng massage	10-17
Vận hành điều khiển giọng nói	18
Điều chỉnh vị trí	19
Tắt nguồn, dừng massage	19
Di chuyển sản phẩm	20
Thông số kỹ thuật	21
Bảo trì và làm sạch	

# AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ

---

## 1. Cảnh báo quan trọng

- Để trẻ em tránh xa các bộ phận chuyển động của sản phẩm này.
- Vui lòng sử dụng nguồn điện nối đất tốt phù hợp với sản phẩm này.
- Vui lòng rút dây nguồn sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh, để tránh thiệt hại hoặc thương tích.
- Vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn.
- Vui lòng không sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này bên ngoài.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm này cho mục đích không được liệt kê trong sách hướng dẫn.
- Thời gian sử dụng khuyến nghị không quá 30 phút.
- Vui lòng không sử dụng nếu nắp bị hỏng.
- Vui lòng không sử dụng nếu các lỗ thông gió bị tắc.
- Vui lòng không thả bất kỳ đồ vật nào vào sản phẩm này.
- Vui lòng không ngủ khi sử dụng sản phẩm này.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này khi say rượu hoặc tình trạng không khỏe.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này trong một giờ sau khi dùng bữa.
- Vui lòng không đẩy mạnh khi sử dụng sản phẩm này để tránh bị thương.

## 2. Môi trường

- Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao ví dụ như trong nhà tắm
- Không sử dụng khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột
- Không sử dụng trong môi trường có nhiều bụi hoặc không khí có nhiều chất ăn mòn
- Không sử dụng trong không gian chật hẹp hoặc sự lưu thông không khí không thuận lợi

## 3. Những đối tượng dưới đây không nên sử dụng sản phẩm

- Người có u ác tính, chứng loãng xương hay vỡ xương cột sống
- Người có bệnh tim hay sử dụng những thiết bị y tế điện tử, được gắn vào cơ thể, ví dụ như máy trợ tim
- Người có biểu hiện sốt cao hay vết thương mở sau phẫu thuật ngoại khoa
- Phụ nữ có thai, đang cho con bú hoặc đang đến thời kì sinh lý
- Người có vết thương ngoài da hoặc bên trong cơ thể
- Trẻ em dưới 14 tuổi mà không có sự giám sát của người lớn; những người có vấn đề về tâm lý không được phép sử dụng sản phẩm này
- Người cần nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ hay có vấn đề về sức khỏe
- Người có cơ thể trong trạng thái ẩm ướt không được phép sử dụng sản phẩm này
- Người nhạy cảm với nhiệt độ cần phải chú ý trong quá trình sử dụng

# AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ

---

## 4. Chú ý an toàn

Kiểm tra xem điện áp có phù hợp với thông số kĩ thuật của sản phẩm hay không

Không cầm hay rút nguồn cung cấp điện khi tay ướt

Không để sản phẩm tiếp xúc với nước để tránh gây ra giật điện hay thiệt hại

Không dùng lực quá mạnh khi cầm hoặc rút phích cắm điện

Không gây hư hại dây điện hay thay đổi sơ đồ mạch

Không vệ sinh những bộ phận đang hoạt động như cầu dao điện hay ổ cắm với khăn ướt

Ngắt công tắc khi bị mất điện để tránh thương tích khi có điện

Khi người dùng cảm thấy sản phẩm có những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với nhà phân phối trong khu vực

Khi người dùng cảm thấy không khỏe khi sử dụng sản phẩm, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ

Sản phẩm này không dành cho người khuyết tật, khiếm khuyết về mặt thần kinh hay những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức căn bản (bao gồm cả trẻ em) trừ khi được hướng dẫn và giám sát bởi người giám hộ

## 5. Bảo trì

Sản phẩm phải được bảo trì tại trung tâm dịch vụ được ủy quyền, người dùng không được phép tự ý tháo rời và sửa chữa

Hãy ngắt nguồn điện sau khi sử dụng

Không sử dụng sản phẩm khi ổ cắm điện bị lỏng

Cuộn dây điện và để sản phẩm ở nơi khô ráo nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài

Không để sản phẩm gần với nơi có nhiệt độ cao, cháy hay dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp

Vệ sinh sản phẩm với khăn khô, không sử dụng chất làm loãng, benzen hay chất có cồn

Những bộ phận kĩ thuật của sản phẩm được thiết kế và sản xuất một cách đặc biệt, không cần bảo trì đặc biệt

Không sử dụng những vật sắc nhọn lên sản phẩm

Không di chuyển sản phẩm trên nền gỗ ghe, nên sử dụng thang máy trở hàng

Không sử dụng sản phẩm liên tục

## 6. Những hiện tượng phổ biến có thể xảy ra

Tiếng động cơ trong quá trình sử dụng là hoàn toàn bình thường

Khi điều khiển không hoạt động, kiểm tra xem dây điện và ổ cắm có được kết nối ổn định hay không, kiểm tra xem liệu cầu dao nguồn điện có đang bật hay không

Khi sản phẩm ngừng hoạt động: sản phẩm sẽ dừng hoạt động một cách tự động khi hết thời gian hoạt động tối đa, vì do sản phẩm hoạt động liên tục dẫn đến bộ bảo vệ nhiệt độ được bật và sẽ tự động tắt, sử dụng sản phẩm sau nửa giờ đồng hồ.




# CẢNH BÁO

---


## ⚠ CẢNH BÁO

Không đẩy chỗ nghỉ bấp chân xuống dưới khi nó đang đi lên để tránh ghế massage nghiêng về phía trước gây ra thiệt hại và thương tích.

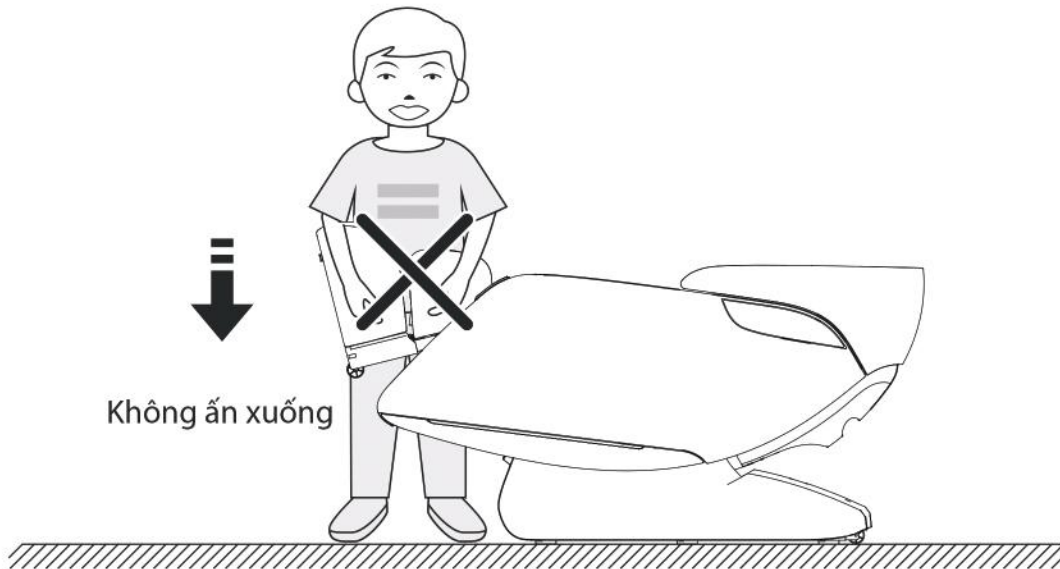

## ⚠ CẢNH BÁO

Đảm bảo rằng tay massage không ở vị trí ngồi trước khi ngồi lên sản phẩm để tránh cảm giác không thoải mái hoặc gây thiệt hại cho tay massage .

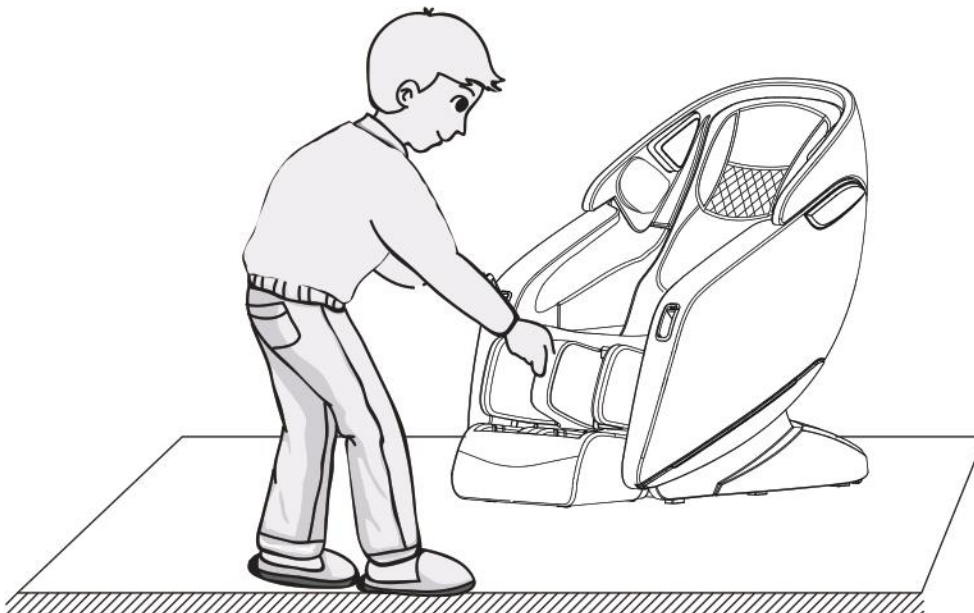




# CẢNH BÁO

---


## ⚠ CẢNH BÁO

Trong chế độ chờ và bật nguồn, không kéo dây điều khiển hay dây nguồn điện để tránh thiệt hại hay bị sốc điện bất ngờ, nên cuộn dây điều khiển và dây nguồn điện .


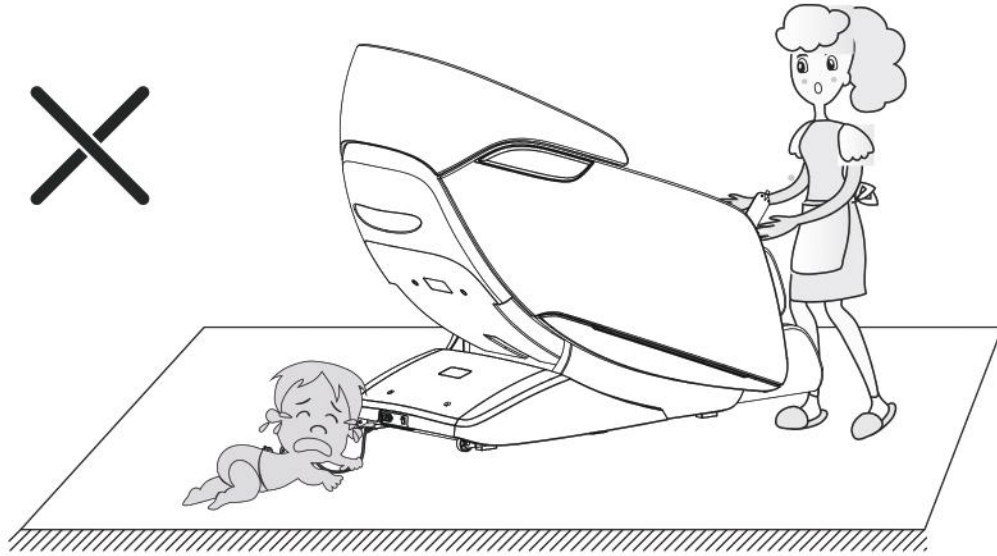


## ⚠ CẢNH BÁO

Đảm bảo không có thú nuôi hay trẻ em ở dưới phần nghỉ chân hay phần nghỉ lưng trước khi chạy chức năng không trọng lực để tránh thiệt hại hay thương tích .

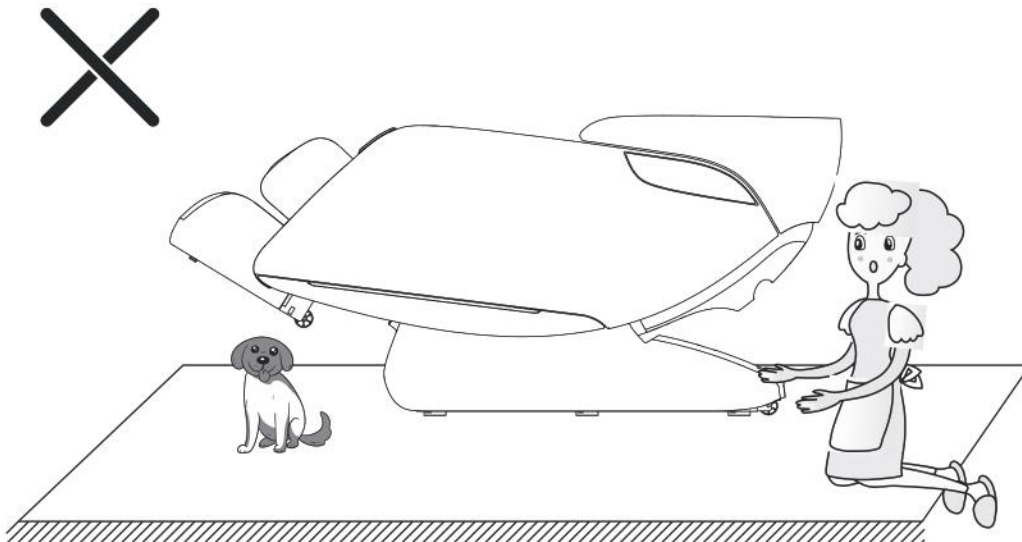

# CHỨC NĂNG

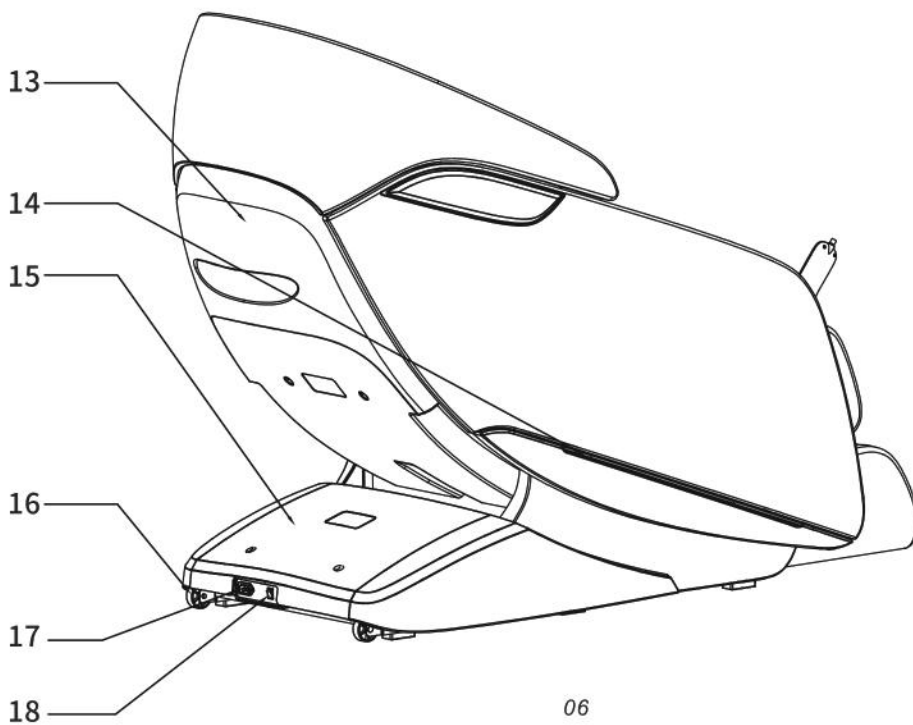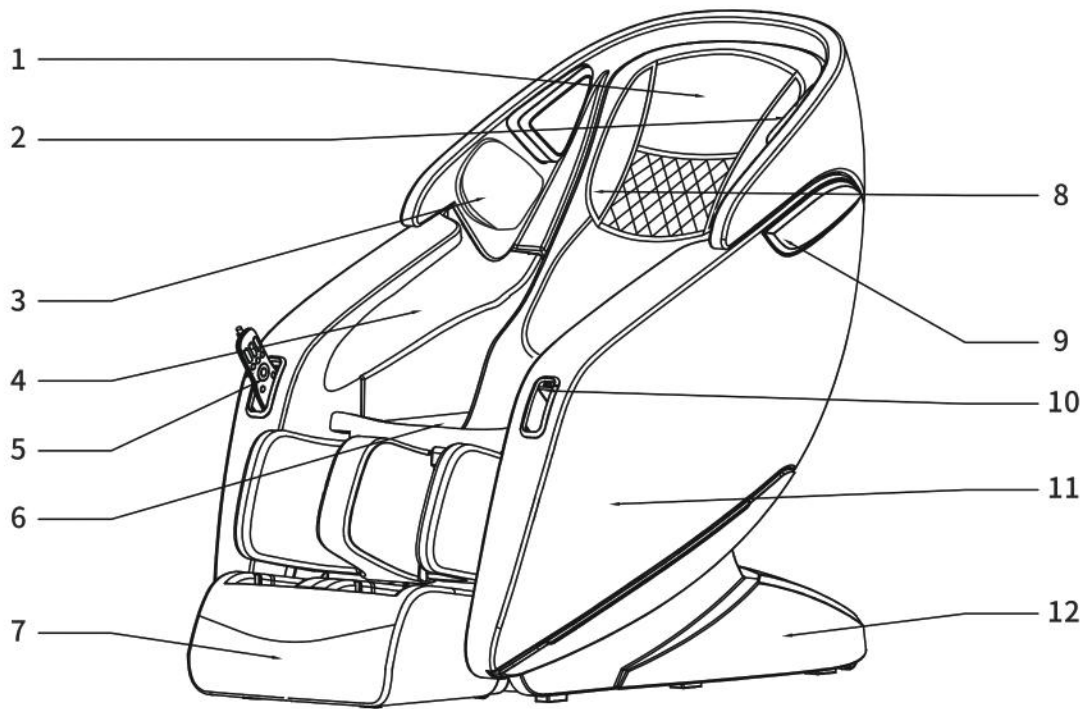

1. Gối
2. Âm thanh kỹ thuật số 3D (điều khiển bằng giọng nói được tích hợp bên cánh)
3. Túi khí bắp tay
4. Túi khí cánh tay
5. Điều khiển từ xa
6. Túi điều khiển từ xa
7. Bắp chân
8. Đệm tựa lưng
9. Tấm trang trí
10. Bộ sạc USB
11. Tay vịn
12. Nắp bên
13. Nắp lưng
14. Đèn LED
15. Vỏ PCB
16. Bánh xe
17. Giắc cắm nguồn
18. Công tắc nguồn

## CHỨC NĂNG

---

Sản phẩm này được thiết kế với tay massage thông minh không có tiếng động, có thể di chuyển lên xuống và có chức năng vỗ và xoa bóp.

Sản phẩm được thiết kế với vị trí vai có thể tự động phát hiện và điều chỉnh.

Nó có thể tự động tính toán các huyết đạo dựa trên chiều cao vai khác nhau từ đó cung cấp kiểu massage khoa học, phù hợp

Sản phẩm được thiết kế với 12 chế độ tự động: Thoải mái, Ngủ ngon, Chăm sóc sức khỏe, Giảm đau, Kéo giãn, Cổ và vai, Massage eo, Trẻ hóa, Hồi phục, Tươi mới, Chế độ người lao động, Chế độ nhân viên.

Sản phẩm được thiết kế với 3 chế độ bộ nhớ.

Chế độ thủ công: có sẵn các tùy chọn cho vị trí massage, chế độ massage, tốc độ massage, độ rộng, con lăn bàn chân và xoa bóp bắp chân.

Túi khí massage: túi khí toàn thân, túi khí phần trên (4 túi khí ở bắp tay trên, 8 túi khí ở tay và cánh tay dưới, thắt lưng, ngồi cạnh 4 túi khí), túi khí thân dưới (22 túi khí), với 3 tùy chọn cường độ.

Nó được thiết kế với chức năng sưởi ấm vùng eo: sử dụng sợi nhỏ làm nguồn hồng ngoại, để đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu.

Độ ngả của tựa lưng thông qua sự kết hợp của xi lanh và đường ray công nghệ giúp tiết kiệm không gian tối đa.

Thanh tựa lưng sử dụng công nghệ thanh ray đường cong SL, phù hợp với tựa lưng tạo hình hoàn hảo và cung cấp massage từ đầu đến đùi.

Âm nhạc không dây Bluetooth: được thiết kế với âm thanh kỹ thuật số 3D ở phần kê tay bên trái và bên phải, giúp người dùng xả stress bằng cách nghe nhạc khi massage.

Nó được thiết kế với chức năng điều khiển bằng giọng nói: máy dò được tích hợp bên trong loa bên trái, hãy tận hưởng massage theo ý muốn của bạn chỉ bằng cách thực hiện các lệnh đơn giản.


Ghế được thiết kế với con lăn duy nhất và xoa bóp bắp chân.

Ghế được thiết kế với phần tựa lưng và phần tựa lưng có thể ngả ra sau.

Ghế được thiết kế với đèn LED trên tay vịn bên trái và bên phải.

Ghế được thiết kế với 3,5 inch TFT điều khiển từ xa đầy màu sắc.

# HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

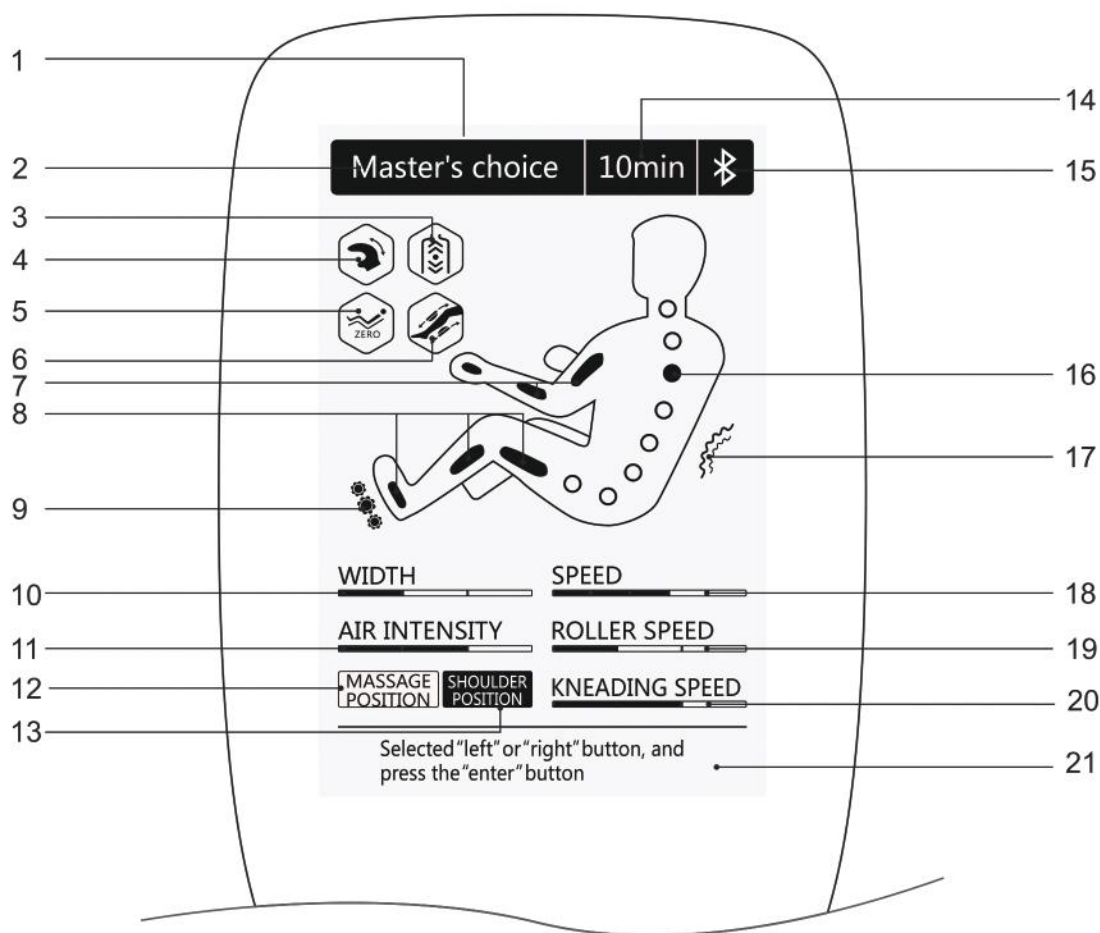


Chú ý: Những màu sắc trên màn hình, phần chữ và nút điều khiển cho các chức năng massage và biểu tượng của chúng cần phải tương thích với màn hình thực tế

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. LCD nhiều màu sắc TFT            | 12. Điều chỉnh vị trí massage                    |
| 2. Hiển thị chức năng massage       | 13. Điều chỉnh vị trí vai                        |
| 3. Hiển thị kéo giãn lưng           | 14. Hẹn giờ                                      |
| 4. Hiển thị phương thức massage     | 15. Bluetooth                                    |
| 5. Hiển thị không trọng lực         | 16. Hiển thị vị trí massage                      |
| 6. Hiển thị xoa bóp phần bắp chân   | 17. Hiển thị cấp nhiệt phần nghỉ lưng            |
| 7. Hiển thị túi khí phần nghỉ tay   | 18. Điều chỉnh tốc độ                            |
| 8. Hiển thị túi khí chân và bắp đùi | 19. Điều chỉnh tốc độ con lăn chân               |
| 9. Hiển thị con lăn chân            | 20. Điều chỉnh tốc độ xoa bóp phần nghỉ bắp chân |
| 10. Điều chỉnh độ rộng              | 21. Thông tin                                    |
| 11. Điều chỉnh lực túi khí          |  |

# HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

---

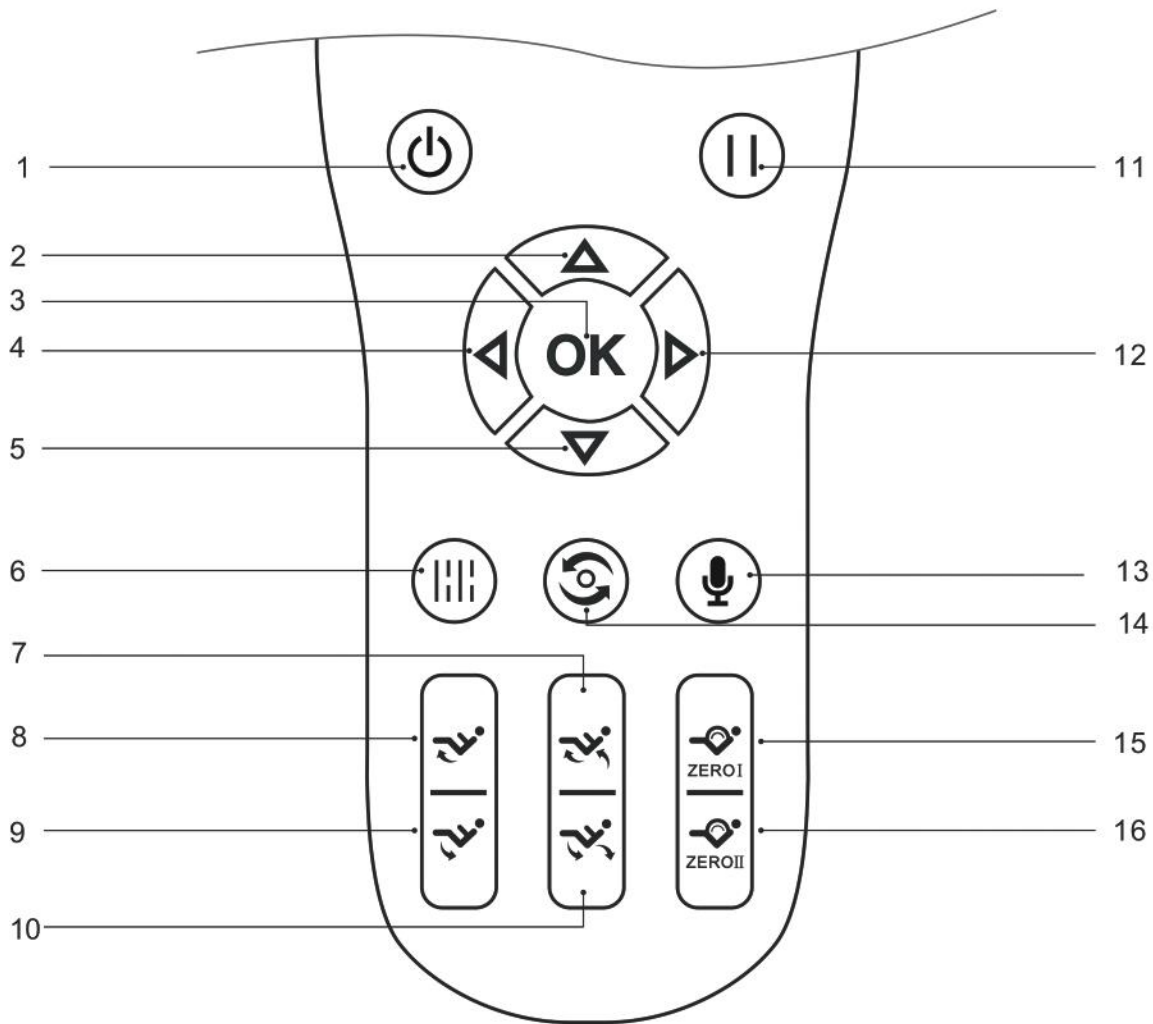

- 
1. Bật/tắt: khởi động hay dừng ghế massage
  2. Lên: di chuyển nút điều hướng lên
  3. Ok: xác nhận
  4. Trái: điều khiển bên trái
  5. Dưới: điều khiển bên dưới
  6. Menu: đi đến giao diện chính
  7. Nâng ghế: ghế massage nâng lên
  8. Nâng phần nghỉ bắp chân: nâng phần nghỉ bắp chân lên
  9. Ngả phần nghỉ bắp chân: hạ phần nghỉ bắp chân xuống

10. Ngả ghế: hạ ghế massage xuống
11. Tạm dừng: dừng những chức năng đang chạy
12. Phải: nút điều hướng bên phải
13. Điều khiển giọng nói
14. Tự động: đi đến chế độ tự động
15. Không trọng lực 1 : điều chỉnh góc tới không trọng lực 1.
16. Không trọng lực 2: điều chỉnh góc tới không trọng lực 2



# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

## I / Bật máy



## II / Vận hành chức năng massage

### 1. Chế độ chờ

Ghế massage đang ở vị trí chờ

Hiển thị màn hình: Fuzi



### 2. Bắt đầu massage (bật/tắt)


· Ấn nút on/off để bắt đầu massage



# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Việc điều chỉnh vị trí vai sau khi massage có thể được thực hiện bằng cách ấn nút điều hướng “Trái hoặc “Phải” để đi đến giao diện vị trí vai, sau đó ấn nút “Lên” hoặc “Xuống” để điều chỉnh.


Màn hình hiển thị:

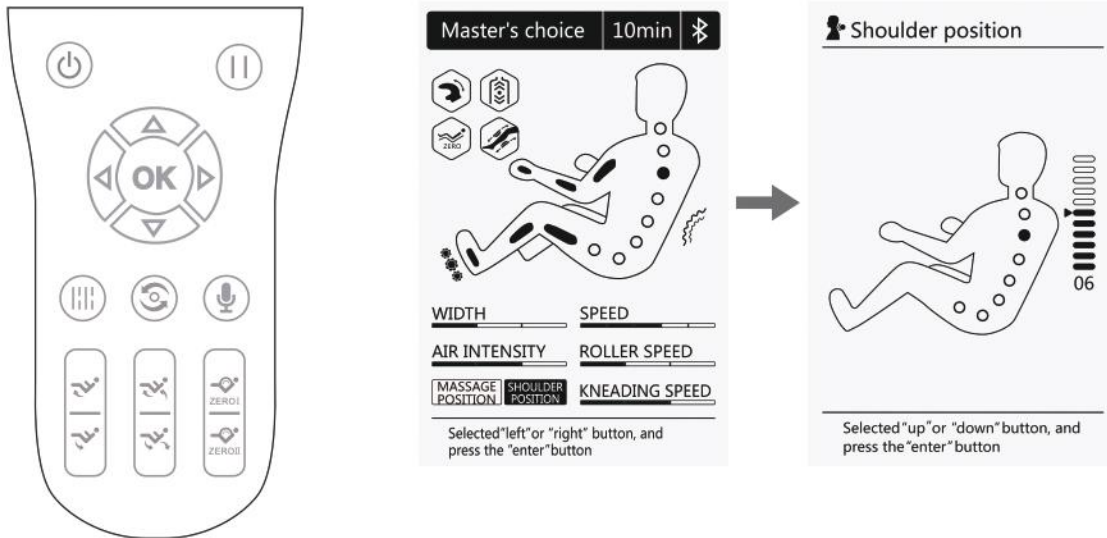

### 3. Điều chỉnh vị trí massage

Nếu vị trí massage cần được thay đổi sau khi khởi động việc massage và chế độ hiện tại đang là cố định hay trạng thái máy đang từng phần ở chế độ điều khiển thủ công, việc điều chỉnh có thể được tiến hành bằng cách ấn nút điều hướng “Trái hoặc “Phải” để đi đến giao diện vị trí massage. Ấn nút “Lên” và giữ chặt để di chuyển tay massage hướng lên, việc di chuyển sẽ dừng lại khi nới lỏng ngón tay; ấn nút “Xuống” và giữ chặt để di chuyển tay massage xuống dưới, việc di chuyển sẽ dừng lại khi nới lỏng ngón tay.


Màn hình hiển thị:

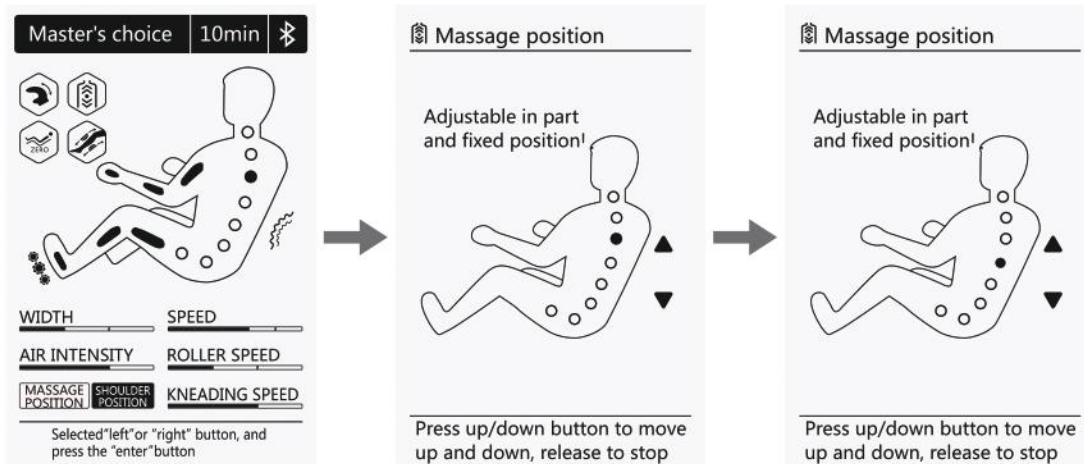

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG


## 3. Tạm dừng

Khi đang trong quá trình massage, ấn nút “Tạm dừng” để dừng các chức năng đang hoạt động, ấn lần nữa để tiếp tục. Nếu thời gian tạm dừng lâu hơn 20 phút, tất cả các chức năng massage sẽ tự động tắt.

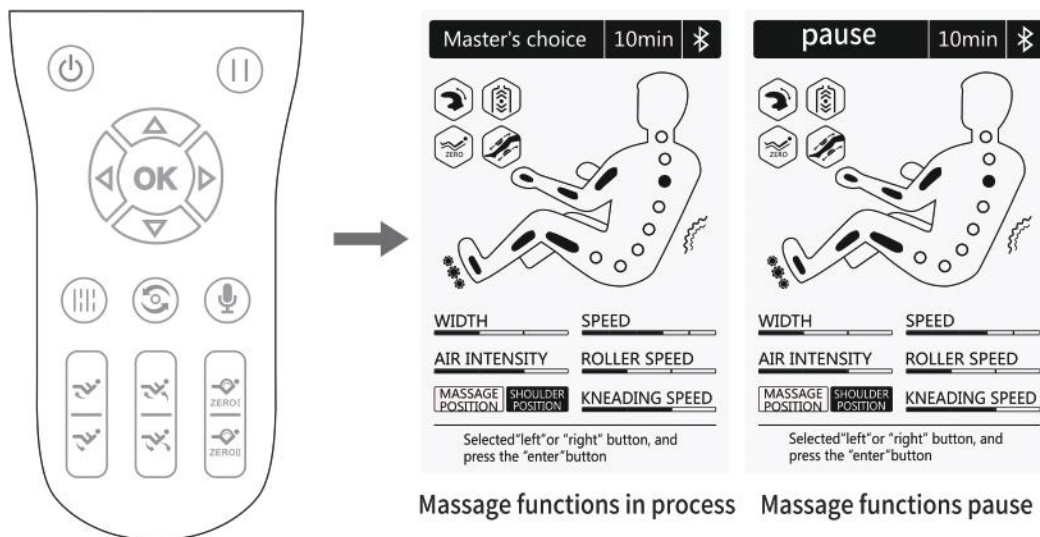

## 4. Menu


Bằng cách ấn nút “Menu” giao diện chính sẽ hiện ra bao gồm chương trình tự động, chương trình thủ công, massage túi khí, chức năng bổ sung, kho bộ nhớ, cài đặt, v.v.. Ấn nút “Lên” hoặc “Xuống” để chọn, ấn nút “Trái” để quay về bảng chọn trước đó, ấn nút “Phải” để đi đến bảng chọn tiếp theo, ấn nút “Ok” để xác nhận.

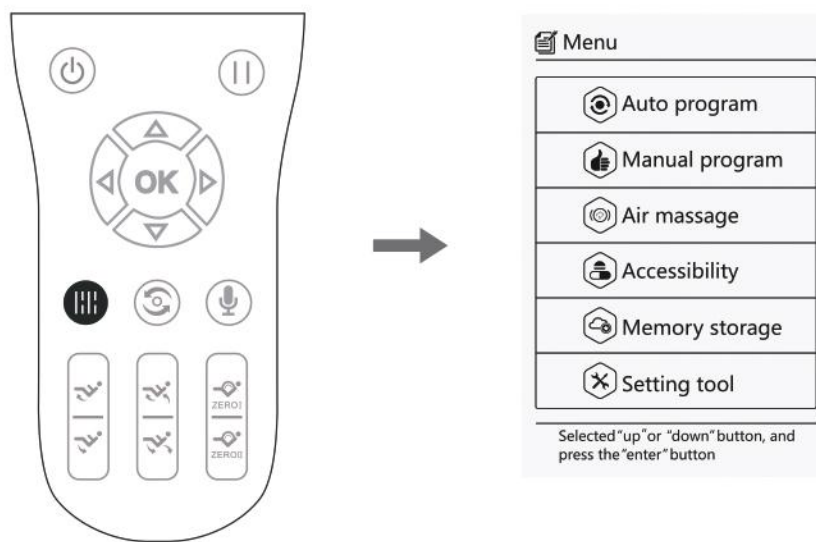

# PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

5. Chương trình tự động (chương trình bảng chọn tự động, có thể đi đến giao diện chương trình tự động bằng cách nhấn nút “Tự động”)

Ấn nút “Menu” để đi đến giao diện bảng chọn, chọn biểu tượng chương trình tự động; có 12 chế độ tự động bao gồm: Thoải mái, Ngủ ngon, Chăm sóc sức khỏe, Giảm đau, Kéo giãn, Cổ và vai, Massage eo, Trẻ hóa, Hồi phục, Tươi mới, Chế độ người lao động, Chế độ nhân viên

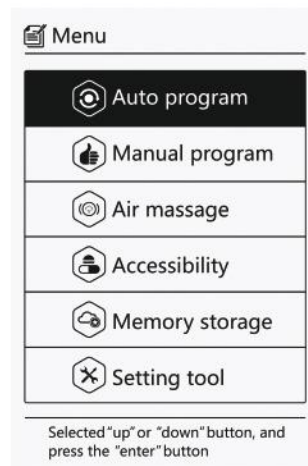

first page



second page